


Description du produit

Ce matelas apporte une aide à la prévention des escarres pour les patients présentant un risque faible à moyen de développement d'escarres, alités entre 10 et 15 heures par jour. Fournis également une aide au traitement des escarres existants de stade 1 et 2 associé à un système de décharge localisée ou de positionnement.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Matelas monobloc moulé multiportance composé d'une partie supérieure en mousse viscoélastique de 6 cm sur une base en mousse de polyuréthane de 8 cm.
- Couche supérieure en mousse viscoélastique : $\geq 75\text{kg/m}^3$
- Base en mousse HR $> 34\text{kg/m}^3$
- Triportance avec 3 zones :
 - En tête portance médium (1,7 kPa),
 - Ferme au niveau de la zone sacrée (1,9 kPa),
 - Souple pour la zone talonnière (1,5 kPa).
- Poids matelas : $\sim 17\text{ kg}$ (PU), (CIC et PU HD)
- Dimension matelas : 195 x 88 x 14 cm
- Dimension de couchage : 200 x 90 cm
- 3 types de housses disponibles pour répondre à tous les besoins.
- 4 types de conditionnement : Roulé comprimé unitaire ou box, Palette box et carton individuel.

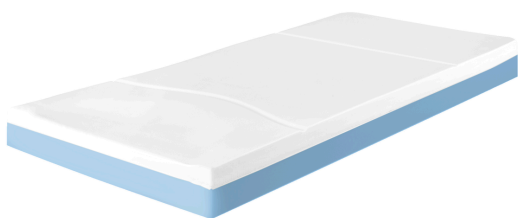

- Poids patient de 30 et 180kg
- Matelas en mousse de polyuréthane haute résilience (HR) moulé d'une seule pièce avec 4 coins coupés.
- Mousse castrée pour éviter les forces de cisaillement
- Housse intégrale amovible et lavable



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires
Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates
T. 022 794 52 54



PRÉVENTION DES ESCARRES



- L'immersion du corps, grâce à une mousse viscoélastique à mémoire de forme, permet de répartir la pression sur une surface plus importante, ce qui réduit les points de pression exercés sur les zones à risque(s) d'escarre(s), quelque soit la morphologie du patient.

GESTION DES TALONS




- La proclive du matelas au niveau du segment jambier renforce la réduction de la pression appliquée au talon en contact avec la matière.

PRÉVENTION DES TROUBLES MUSCULO-SQUELETTIQUES



- Le poids du matelas de 15,5 kg réduit les contraintes physiques lors des manutentions manuelles (transport, nettoyage, réfection du lit)

CONFORT

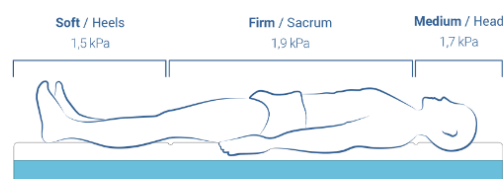

- Le matelas ALOVA VMA64 est composé de 3 zones de portance différentes pour s'adapter à chaque zone du corps (tête/sacrum/talons) et assurer un confort d'alitement.



BESOIN D'AIDE ? CONTACTEZ-NOUS

fh. Moyens Auxiliaires

Chemin du Pont du Centenaire 116 | 1228 Plan-les-ouates

T. 022 794 52 54

